

Sistema de bolsa de 2 piezas

Preparación de materiales y herramientas



La bolsa colectora, el protector cutáneo (parche), la bolsa de residuos, un paño de papel o tela y agua para limpiar. Opcional: tijeras, bolígrafo, guía de medición y accesorios.

Retire el sistema de bolsa usado



Levante cuidadosamente una punta del adhesivo y despegue hacia abajo, desprendiendo delicadamente la piel del protector cutáneo. Deseche adecuadamente la bolsa y el protector cutáneo usados. No los arroje por el excusado.

Limpie y seque la piel



Limpie la piel con agua o con jabón suave según las indicaciones de un profesional de la salud. Enjuáguela y séquela completamente. No utilice aceites, polvos de talco, loción o jabones perfumados sobre la piel.

Controle el estado de la piel



Controle para asegurar que la piel alrededor del estoma (periestomal) esté intacta, sin irritación, erupción o enrojecimiento.*

*Comuníquese con su profesional de enfermería del WOC/NSWOC si nota irritación, erupción o enrojecimiento.

Preparación del protector cutáneo y la bolsa



Mida el diámetro de su estoma utilizando una guía de medición antes de cada aplicación del protector (si utiliza una abertura de protector con tamaño predefinido, pase al punto 6).



Trace en el protector cutáneo (parche) una abertura del tamaño del protector correspondiente. El protector cutáneo (parche) debe encajar en el punto de contacto entre la piel y el estoma. Verifique que no se pueda ver la piel entre el protector cutáneo (parche) y el estoma para evitar fugas e irritación cutánea.



Con tijeras pequeñas, recorte cuidadosamente una abertura en el protector cutáneo (parche) que coincida con la forma trazada. No corte por fuera de la línea sobre el papel antiadherente.



Retire el papel antiadherente del protector cutáneo.

Añada pasta o anillos si resulta necesario



Si corresponde, aplique un anillo de barrera o una cantidad pequeña de pasta alrededor de la abertura según las instrucciones de uso.


Aplique el nuevo sistema de bols



Centre la abertura del protector cutáneo (parche) alrededor del estoma, en forma de diamante. En el caso de utilizar protector con cinta adhesiva en los bordes, retire el papel protector de ambos lados y presione el adhesivo contra la piel.



Aplique una leve presión al protector cutáneo (parche) por un minuto para una mejor adherencia.

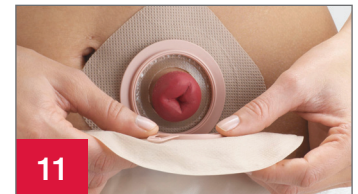

Una la bolsa al protector cutáneo trabando los bordes inferiores del reborde de la bolsa y el reborde del protector cutáneo. Presione ambos rebordes. Una serie de "clics" confirmarán que lo está realizando correctamente. Cuando ya no escuche ningún "clic", la bolsa se encontrará asegurada.



Cierre el extremo de la bolsa. En caso de utilizar una bolsa abierta, cierre el extremo de la bolsa con el cierre microsellado **Lock 'n Roll** o coloque una pinza. Consulte el consejo de cuidado del cierre microsellado **Lock 'n Roll** para obtener más información sobre cómo utilizar este sistema de cierre.



Válvula

En caso de utilizar una bolsa para urostomía, asegúrese de que el grifo de drenaje se encuentre cerrada. El gotero de el grifo de drenaje debe quedar del lado de la bolsa que está en contacto con el cuerpo. Si lo desea, colóquela la tapa que fue incluida en la caja.

Sistema de bolsa de 2 piezas

CONSEJOS	LISTA DE PRODUCTOS	N.º DE STOCK
<ul style="list-style-type: none">• La piel alrededor del estoma no debe tener ningún signo de erupción o herida.• Consulte con un profesional de la salud en caso de tener la piel irritada.• En caso de utilizar un anillo de barrera o pasta, aplíquelo a la parte adhesiva del protector cutáneo (parche) junto a la abertura del estoma, siguiendo las instrucciones.• Luego de la cirugía, el estoma puede presentar hinchazón. Pueden pasar varias semanas o meses hasta que el estoma termine de encogerse.• Al limpiarlo, el estoma puede sangrar levemente.• No se recomienda usar paños protectores cutáneos debajo de los protectores cutáneos de uso prolongado, ya que pueden reducir la duración.	Sistema de bolsa de 2 piezas	
	Protector cutáneo (parche)	_____
	Bolsa	_____
	Accesorios	
	Anillos de barrera	_____
	Cinturón para ostomía	_____
	Pasta	_____
Desodorante lubricante	_____	
Polvo para estoma	_____	
Otros _____	_____	

Instrucciones Adicionales:

Para solicitar una muestra, si tiene consultas sobre el producto o preguntas clínicas específicas, llame al **1.888.808.7456** si se encuentra en EE. UU. En Canadá, llame al **1.800.263.7400**.

La piel debe estar limpia y seca antes de aplicar el protector cutáneo.

Antes de usar productos u accesorios de ostomía, asegúrese de haber leído todas las etiquetas y los prospectos del producto.

El logotipo de Hollister, Lock 'n Roll y "Healthy skin. Positive outcomes." (Piel sana, resultados positivos) son marcas comerciales registradas de Hollister Incorporated. © 2018 Hollister Incorporated. 923082-1218 US-00205

Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048
1.800.323.4060

www.hollister.com

Hollister Limited
95 Mary Street
Aurora, Ontario L4G 1G3
1.800.263.7400