

New Image

Equipamento de 2 peças
para estomia



**Sem limites para
viver plenamente**



Hollister

Atenção aos Detalhes. Cuidado com a Vida.

New Image


Segurança, flexibilidade, discrição e conforto em um único produto

Bases adesivas

Ampla variedade de opções com características que atendem às necessidades individuais do ostomizado.

■ Flange flotante

Não há necessidade de pressionar a bolsa na região abdominal para encaixá-la – baixo perfil altamente **flexível**. Possui um sistema de encaixe com *click* audível, basta encaixar e “*click!*”, base adesiva e bolsa estão seguramente encaixadas.

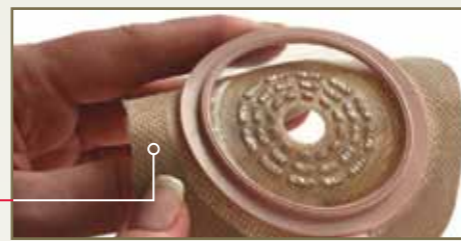

Barreira de resina sintética **Flextend** altamente absorvente, flexível e durável. Planas e convexas, recortáveis e pré-cortadas.




■ Segurança adicional

Bases com resina e exclusivo **adesivo Hollister**, hipoalergênico, altamente flexível e permite a troca gasosa. Molda-se aos contornos da pele, garantindo mobilidade, flexibilidade e conforto, com segurança.



■ Convexidade na medida certa

É a mais bem aceita pelo ostomizado, pois garante a proteção necessária com flexibilidade e conforto. Gerenciamento perfeito de **90%** das situações clínicas que requerem o uso de **convexidade**.¹

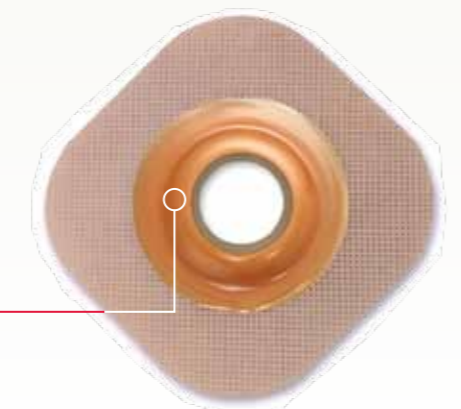

New Image

0 equipamento de 2 peças mais fácil de se utilizar

Bases adesivas

Único fechamento integrado por conectores plásticos

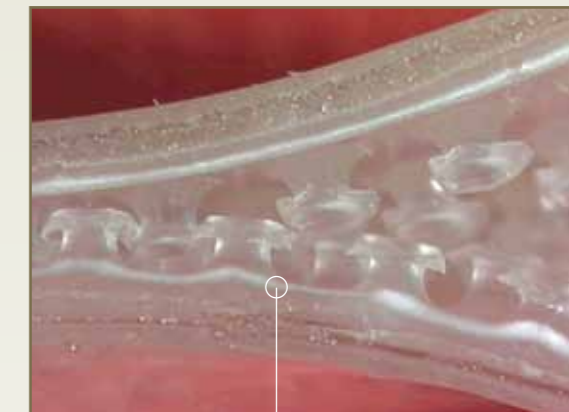


foto ampliada

■ Fácil de fechar, esvaziar e higienizar.



■ Simplesmente dobre a bolsa três vezes na mesma direção e pressione do centro para as extremidades, efetuando o fechamento.



New Image

EQUIPAMENTO
BEM INDICADO = QUALIDADE DE VIDA GARANTIDA

Filtro AF300

Eficiente, prático e seguro.

- Melhor e maior controle de odor
- Redução do embaçamento
- Proteção contra líquidos



Nos rótulos dos produtos há uma faixa colorida que é o código de cores para identificação do tamanho da flange. Para montar o sistema **Base Adesiva + Bolsa**, o tamanho da flange – código de cores – deverá ser o mesmo, como nas tabelas abaixo:

New Image Códigos das Bases Adesivas com Flange de 44 mm	
15602	Plana \approx 13-32 mm
15802	Convexa \approx 13-25 mm
15903	Convexa pré-corte 22 mm
15904	Convexa pré-corte 25 mm
14602	Plana \approx 13-32 mm – adesivo
14802	Convexa \approx 13-25 mm – adesivo
14901	Convexa pré-corte 16mm – adesivo
14902	Convexa pré-corte 19 mm – adesivo
14903	Convexa pré-corte 22 mm – adesivo
14904	Convexa pré-corte 25 mm – adesivo

New Image Códigos das Bolsas com Flange de 44 mm		
Bolsas Drenáveis		
Transparente		Opaca
Fechamento integrado por conectores plásticos		
18132		18112
Fechamento por conectores plásticos e filtro desodorizante para gases integrados		
18192		18182
Fechamento por presilha plástica (clamp)		
18102		18122
Bolsas fechadas com filtro desodorizante para gases		
-		18372
Bolsas para urostomia		
Transparente		Ultra-transparente
18402		18422

New Image Códigos das Bases Adesivas com Flange de 57 mm	
15603	Plana \approx 13-44 mm
15803	Convexa \approx 13-38 mm
15905	Convexa pré-corte 29 mm
15906	Convexa pré-corte 32 mm
14603	Plana \approx 13-44 mm – adesivo
14803	Convexa \approx 13-38 mm – adesivo
14905	Convexa pré-corte 29 mm – adesivo
14906	Convexa pré-corte 32 mm – adesivo
14907	Convexa pré-corte 35 mm – adesivo
14908	Convexa pré-corte 38 mm – adesivo

New Image Códigos das Bolsas com Flange de 57 mm		
Bolsas Drenáveis		
Transparente		Opaca
Fechamento integrado por conectores plásticos		
18133		18113
Fechamento por conectores plásticos e filtro desodorizante para gases integrados		
18193		18183
Fechamento por presilha plástica (clamp)		
18103		18123
Bolsas fechadas com filtro desodorizante para gases		
-		18373
Bolsas para urostomia		
Transparente		Ultra-transparente
18403		18423

New Image Códigos das Bases Adesivas com Flange de 70 mm	
15604	Plana \approx 13-57 mm
15804	Convexa \approx 13-51 mm
14604	Plana \approx 13-57 mm – adesivo
14804	Convexa \approx 13-51 mm – adesivo
14909	Convexa pré-corte 41 mm – adesivo
14910	Convexa pré-corte 44 mm – adesivo
14911	Convexa pré-corte 51 mm – adesivo

New Image Códigos das Bolsas com Flange de 70 mm		
Bolsas Drenáveis		
Transparente		Opaca
Fechamento integrado por conectores plásticos		
18134		18114
Fechamento por conectores plásticos e filtro desodorizante para gases integrados		
18194		18184
Fechamento por presilha plástica (clamp)		
18104		18124
Bolsas fechadas com filtro desodorizante para gases		
-		18374
Bolsas para urostomia		
Transparente		-
18404		-

New Image Códigos das Bases Adesivas com Flange de 102 mm	
14606	Plana \approx 89 mm – adesivo

New Image Códigos das Bolsas com Flange de 102 mm		
Bolsas Drenáveis		
Ultra-transparente		
Fechamento integrado por conectores plásticos		
18006		-

Conheça o **QualiVida**

Programa de Atendimento
ao Estomizado

0800 778 1000

Ligação gratuita
Horário comercial
qualidade@hollister.com.br

Conheça nossos produtos:

Fale conosco: hollister.brazil@hollister.com.br

Referência Bibliográfica: 1) *Convexidade faz Sentido* – *Rae Bourke* – Royal Melbourne Hospital, Melbourne, Victoria; *Elizabeth Davis* – St. Vincent's Hospital, Melbourne, Victoria; *Susan Dunne* – St. Vincent's Hospital, Sydney, New South Wales; *Carmen George* – Clinical Nurse Specialist Services, Adelaide, New South Wales; *Julia Kittscha* – St. George Hospital, Kogarah, New South Wales; *Carol Stott* – Prince of Wales Hospital, Randwick, New South Wales; *Paris Purnell* – Hollister Incorporated, Libertyville, Illinois, USA



Hollister

Hollister do Brasil
Rua Arizona, 1349
9º andar – cj 9B
São Paulo – SP
Tel. (11) 5506-6550
Anvisa nº 10326400007
10326400008

Hollister e logo, Adapt, Flexent são marcas registradas de Hollister Incorporated, Libertyville, Illinois, Estados Unidos.